




Rozmrazování a ohřívání
plazmy a krevních produktů
- bezpečně a spolehlivě

Barkey plasmatherm

Barkey Plasmatherm rozmrazuje vaky FFP a ohřívá krev, koncentráty erytrocytů (EC), kryokonzervované přípravky, kryokonzervované kmenové buňky (HPC), Octoplas LG[®] nebo infuzní roztoky.

Přehled výhod

- rozmrazuje 4 sáčky najednou (v případě nouze až 8)
- jednoduchá a intuitivní aplikace
- zařízení pro suché rozmrazování = snížené riziko
- vysoký hygienický standard díky suchému ohřevu (bez přímého kontaktu s vodou)
- hladké povrchy a zaoblené hrany
- snadné čištění pomocí dezinfekčních ubrousků
- 2 senzory detekce úniku
- zkratky pro programy: plazma, krev, HPC, Octoplas a uživatelský program
- velký displej s jednoduchým textem
- výměna vody pouze jednou za rok
- polštáře odpovídají produktu

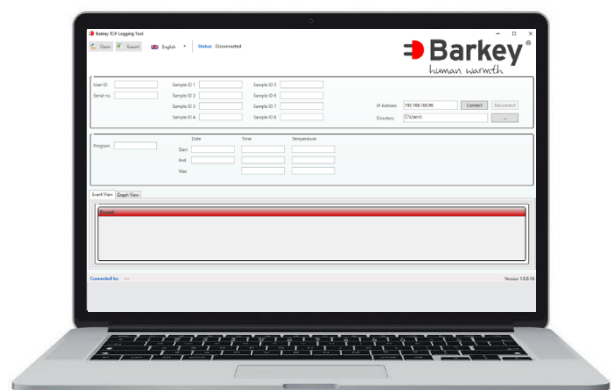

Dokumentujte proces temperování pomocí nástroje pro protokolování Barkey TCP

Barkey plasmatherm

Příslušenství (volitelné)

- dokumentační software Barkey TCP Logging Tool (přes ethernetové připojení)
- čtečka čárových kódů
- tiskárna protokolů

Hygiena

- žádné riziko kontaminace v důsledku suchého rozmrazování a ohřívání (bez přímého kontaktu s vodou)
- snadné čištění pomocí dezinfekčních ubrousků
- odolný proti korozi

Bezpečnost

- elektronický a mechanický alarm přehřátí
- nastavitelný teplotní rozsah od +37°C do +45°C (pro program plazma)
- vizuální a akustický signál po skončení doby ohřevu nebo v případě chyby
- vizuální kontrola díky čířým polštářům a víku
- 2 senzory detekce úniku



| | |
|-----------------|---|
| produkt | Barkey plasmatherm |
| zdroje napětí | 220-240 V 50/60 Hz or 100-120 V 50/60 Hz |
| teplotní rozsah | +37°C až +45°C; US: +37°C |
| rozměry | 340 x 600 x 320 mm (ŠxHxV) |
| váha bez náplně | 18 kg |
| množství náplně | 9 l |

| | |
|--------------------------------|---|
| rozhraní/ zařízení (volitelné) | Čtečka čárových kódů, tiskárna protokolů, ethernet port |
| MDD klasifikace | Ila |
| certifikace | CE 0123 |
| Barkey certifikát | DIN EN ISO 13485 |